

MERYcare to zaawansowany, poziomy lub pionowy panel nadłożkowy stworzony z myślą o specyfice pracy na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM/ICU). Łączy wysoką jakość wykonania, funkcjonalność i ergonomię, wspierając personel w działaniach wymagających szybkości, precyzji i niezawodności.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Panel pionowy – V (Vertical)
- Przekrój panelu zbliżony do Trójkąta – CUBE T
- Od frontu na całej długości rura o dużej nośności do montażu sprzętu, mocowana wyłącznie do górnej i dolnej pokrywy, bez dodatkowych wsporników na całej długości rury
- W przedniej części, po obu stronach zestaw elastycznych uchwytów, wykonanych z tworzywa sztucznego, pełniących funkcję organizera przewodów
- Gniazda elektryczne i teletechniczne oraz punkty poboru gazów medycznych umieszczone w dwóch pionowych rzędach
- Uproszczony montaż z wykorzystaniem szablonu
- Duża elastyczność doprowadzenia instalacji – szerokie pola wprowadzenia mediów do panelu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Korpus wykonany z profili aluminiowych montowanych bezpośrednio do ściany
- Poszycie konsoli wykonane z blach aluminiowych malowanych proszkowo
- Akcenty kolorystyczne – maskownice aluminiowe malowane proszkowo
- Wymiary:
- Długość paneli (standardowo): 1 stanowiskowy – 1460 mm
- Głębokość: 365 mm
- Szerokość: 340 mm

PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI

- Systemy PPG: AGA / DIN / BS / AFNOR / inne

OPCJONALNE OŚWIETLENIE

- Rodzaje oświetlenia: LED
- Konfiguracja oświetlenia: górne, dolne, boczne
- Załączanie oświetlenia realizowane włącznikiem/przyciskiem na panelu i/lub ścianie i/lub manipulatorem systemu przyzywowego

CECHY SZCZEGÓLNE

- Gniazda elektryczne i teletechniczne montowane pod kątem 25 stopni do podłoża

WYPOSAŻENIE TYPOWE DLA SAL SZPITALNYCH


- Panel jednostanowiskowy 1460 mm
- Punkty poboru gazów medycznych - 2x O₂, 2x AIR, 2x VAC
- Gniazdo elektryczne 230 V - 12 szt. (2 obwody)
- Gniazdo ekwipotencjalne - 8 szt.
- Gniazdo teletechniczne RJ-45, kat. 6 - 2 szt.
- Otworowanie pod dodatkowe gniazda niskoprądowe – 2 szt.
- Oświetlenia górne i dolne: 1x 18W LED, 2200 lm, Ra>90: włącznik na panelu
- Otworowanie pod system przyzywawczy

GNIAZDA ELEKTRYCZNE I TELETECHNIKA

- Gniazda elektryczne: Typ E (FR) / Typ F (Schuko) / Typ G (BS) / inne
- Gniazda IT: RJ-11 / RJ-12 / RJ-45, kategoria 6a lub wyższa
- Gniazda multimedialne: USB, HDMI, inne
- System przyzywowy według wymagań klienta

WERSJA A

E – Wejście instalacji elektrycznej i teletechnicznej, 210 x 500 mm
G – Wejście instalacji gazowej, 120 x 500 mm

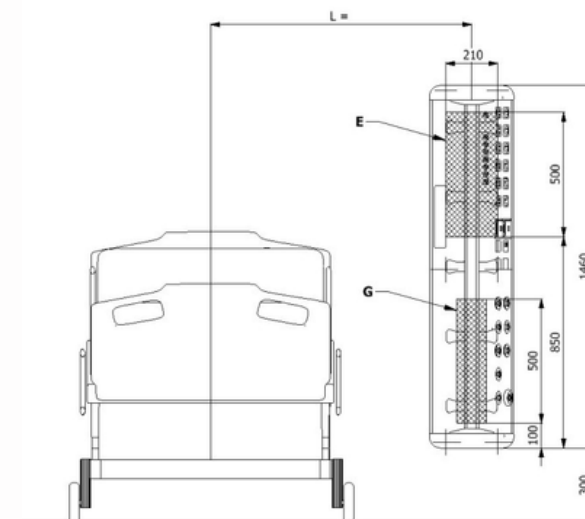

WERSJA B

(lustrzane odbicie)

