

MERYclassic to funkcjonalny panel nadłóżkowy, zaprojektowany z myślą o efektywnym i bezpiecznym zasilaniu stanowisk opieki w salach szpitalnych. Dzięki modułowej budowie i szerokim możliwościom konfiguracji, zapewnia integrację instalacji gazowych, elektrycznych i oświetlenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Korpus wykonany z profili aluminiowych anodowanych lub malowanych proszkowo montowanych bezpośrednio do ściany
 - Pokrywa gazowa malowana proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL
 - Ilość wejść instalacyjnych zależna od konfiguracji i wyposażenia panelu
- Wymiary:
- Długość paneli (standardowo): 1-stanowiskowy – 1600 mm, 2-stanowiskowy – 3200 mm, 3-stanowiskowy – 4800 mm
 - Możliwość realizacji paneli o niestandardowych długościach
 - Głębokość: 110 mm
 - Wysokość: 240 / 270 / 370 / 400 mm – zależnie od konfiguracji

PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI

- Systemy PPG: AGA / DIN / BS / AFNOR / inne
- Umieszczenie PPG od strony korytarza

OPCJONALNE OŚWIETLENIE

- Rodzaje oświetlenia: LED / 2G11
- Konfiguracja oświetlenia: ogólne, miejscowe, nocne
- Załączanie oświetlenia realizowane włącznikiem/przyciskiem na panelu i/lub ścianie i/lub manipulatorem systemu przyzywowego

CECHY SZCZEGÓLNE

- Gniazda elektryczne i teletechniczne montowane pod kątem 25 stopni do podłoża
- Możliwość montażu szyn medycznych ze stali kwasoodpornej

WYPOSAŻENIE TYPOWE DLA SAL SZPITALNYCH



- Panel jednostanowiskowy 1600 mm - zalecany
- Punkty poboru gazów medycznych - 1x O₂, 1x VAC
- Gniazdo elektryczne 230 V - 3 szt. (2 obwody)
- Gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt.
- Gniazdo teletechniczne RJ-45, kat. 6 - 1 szt.
- Oświetlenie ogólne 1x 24W LED, 4400 lm: włącznik na panelu
- Oświetlenie miejscowe 1x 12W LED, 2200 lm: włącznik na panelu
- Oświetlenie nocne 1x 4W LED, 300 lm: włącznik na panelu
- Otworowanie pod system przyzywowy

GNIAZDA ELEKTRYCZNE I TELETECHNIKA

- Gniazda elektryczne: Typ E (FR) / Typ F (Schuko) / Typ G (BS) / inne
- Gniazda IT: RJ-11 / RJ-12 / RJ-45, kategoria 6a lub wyższa
- Gniazda multimedialne: USB, HDMI, inne
- System przyzywowy według wymagań klienta

WERSJA A

E – Wejście instalacji elektrycznej, 180 x 50 mm
G – Wejście instalacji gazowej, 200 x 50 mm

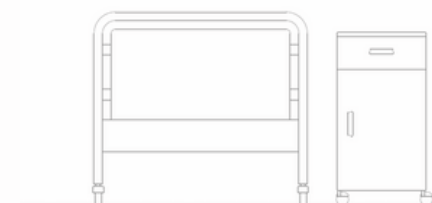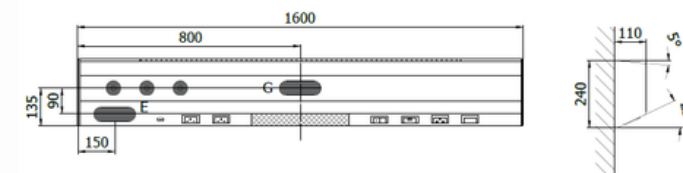

WERSJA B

(ilustracje odbicie)

