


MERYcomfort to nowoczesny panel nadłóżkowy zaprojektowany z myślą o komforcie pacjenta i wygodzie pracy personelu medycznego. Dzięki eleganckiemu wykończeniu z Corianu® oraz podziałowi na strefę pacjenta i lekarza, zapewnia przejrzystość funkcji i ergonomię obsługi. Zintegrowane systemy mediów oraz wielostrefowe oświetlenie tworzą spójną i funkcjonalną przestrzeń szpitalną.

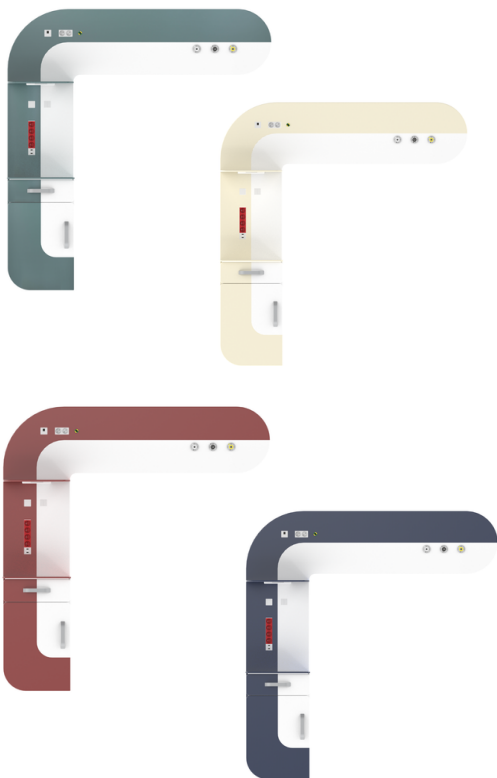

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Korpus wykonany z profili aluminiowych anodowanych montowanych bezpośrednio do ściany
- Dekoracyjny panel frontowy wykonany z Corianu® (dowolny kolor z dostępnej palety)
- Wymiary:
- Długość paneli (standardowo): 1-stanowiskowy – 1750 mm, 2-stanowiskowy – 3350 mm, 3-stanowiskowy – 4950 mm
- Głębokość: 77 mm

PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI

- Systemy PPG: AGA / DIN / BS / AFNOR / inne
- Umieszczenie PPG od strony korytarza

OPCJONALNE OŚWIETLENIE

- Rodzaje oświetlenia: LED / 2G11
- Konfiguracja oświetlenia: ogólne, miejscowe, nocne
- Załączanie oświetlenia realizowane włącznikiem/przyciskiem na panelu i/lub ścianie i/lub manipulatorem systemu przyzywowego

CECHY SZCZEGÓLNE

- Podział panelu na dwie strefy funkcjonalności: dla pacjenta / dla lekarza

WYPOSAŻENIE TYPOWE DLA SAL SZPITALNYCH

- Punkty poboru gazów medycznych - 1x O2, 1x VAC
- Gniazdo elektryczne 230 V - 3 szt. (2 obwody)
- Gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt.
- Gniazdo teletechniczne RJ-45, kat. 6 - 1 szt.
- Oświetlenie ogólne 1x 24W LED, 4400 lm: włącznik na panelu
- Oświetlenie miejscowe (do czytania) 1x 12W LED, 2200 lm: włącznik na panelu
- Oświetlenie miejscowe (boczne) 1x 12W LED, 2200 lm: włącznik na panelu
- Oświetlenie nocne 1x 4W LED, 300 lm: włącznik na panelu
- Otworowanie pod system przyzywowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


- Półka aparaturowa
- Podwieszana szafka przyłóżkowa

GNIAZDA ELEKTRYCZNE I TELETECHNIKA

- Gniazda elektryczne: Typ E (FR) / Typ F (Schuko) / Typ G (BS) / inne
- Gniazda IT: RJ-11 / RJ-12 / RJ-45, kategoria 6a lub wyższa
- Gniazda multimedialne: USB, HDMI, inne
- System przyzywowy według wymagań klienta

WERSJA A

E – Wejście instalacji elektrycznej
G – Wejście instalacji gazowej

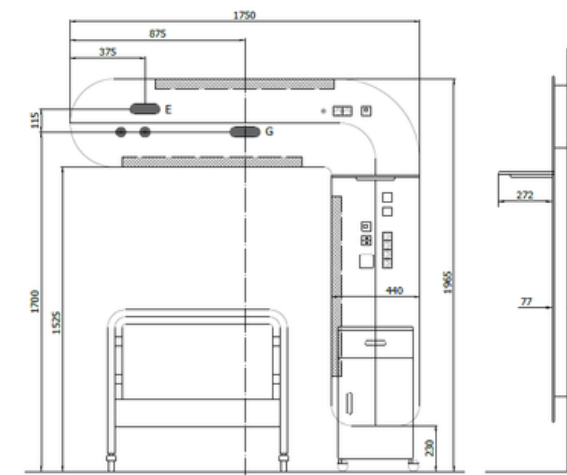

WERSJA B (lustrzane odbicie)

