
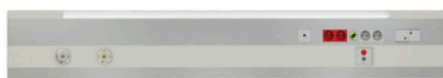
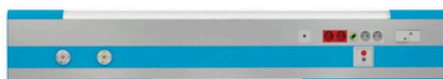


**MERYlight** to funkcjonalny panel nadłóżkowy, zaprojektowany z myślą o nowoczesnych salach szpitalnych. Umożliwia wygodny i bezpieczny dostęp do wszystkich niezbędnych mediów, łącząc instalacje gazowe, elektryczne, teletechniczne oraz oświetlenie w jednej kompaktowej konstrukcji.

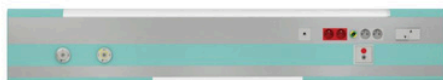

## GNIAZDA ELEKTRYCZNE I TELETECHNIKA

- Gniazda elektryczne: Typ E (FR) / Typ F (Schuko) / Typ G (BS) / inne
- Gniazda IT: RJ-11 / RJ-12 / RJ-45, kategoria 6a lub wyższa
- Gniazda multimedialne: USB, HDMI, inne
- System przyzywowy według wymagań klienta

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Korpus wykonany z profili aluminiowych anodowanych lub malowanych proszkowo montowanych bezpośrednio do ściany
- Pokrywa gazowa malowana proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL
- Ilość wejść instalacyjnych zależna od konfiguracji i wyposażenia panelu

Wymiary:

- Długość paneli (standardowo): 1-stanowiskowy – 1600 mm, 2-stanowiskowy – 3200 mm, 3-stanowiskowy – 4800 mm
- Możliwość realizacji paneli o niestandardowych długościach
- Głębokość: 65 mm
- Wysokość: 290 / 300 / 305 / 310 mm – zależnie od konfiguracji

## PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI

- Systemy PPG: AGA / DIN / BS / AFNOR / inne
- Umiejscowienie PPG od strony korytarza

## OPCJONALNE OŚWIETLENIE

- Rodzaje oświetlenia: LED / 2G11
- Konfiguracja oświetlenia: ogólne, miejscowe, nocne
- Załączanie oświetlenia realizowane włącznikiem/przyciskiem na panelu i/lub ścianie i/lub manipulatorem systemu przyzywowego

## CECHY SZCZEGÓLNE



- Najpłytszy panel w ofercie – głębokość 65 mm (bez szyn)
- Punkty poboru gazów, gniazda elektryczne i teletechniczne zlokalizowane na froncie panelu
- Możliwość montażu aluminiowych szyn medycznych i/lub szyn ze stali kwasoodpornej

## WYPOSAŻENIE TYPOWE DLA SAL SZPITALNYCH

- Panel jednostanowiskowy 1600 mm - zalecany
- Punkty poboru gazów medycznych - 1x O2, 1x VAC
- Gniazdo elektryczne 230 V - 3 szt. (2 obwody)
- Gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt.
- Gniazdo teletechniczne RJ-45, kat. 6 - 1 szt.
- Oświetlenie ogólne 1x 24W LED, 4400 lm: włącznik na panelu
- Oświetlenie miejscowe 1x 12W LED, 2200 lm: włącznik na panelu
- Oświetlenie nocne 1x 4W LED, 300 lm: włącznik na panelu
- Otworowanie pod system przyzywowy

## WERSJA A

E – Wejście instalacji elektrycznej, 180 x 50 mm  
G – Wejście instalacji gazowej, 200 x 50 mm

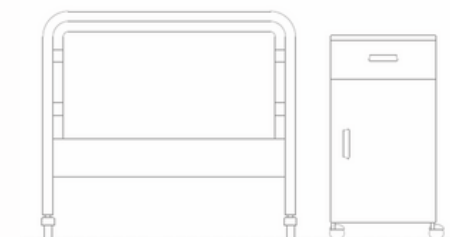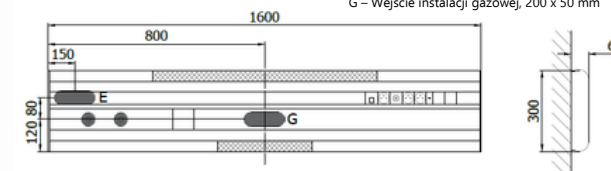

## WERSJA B

(lustrzane odbicie)

