



Sufitowo-podłogowa jednostka **VEGAcare** jest przeznaczona do dystrybucji mediów gazowych i elektrycznych oraz zapewnienia ergonomicznego dostępu do urządzeń niezbędnych w pracy personelu medycznego. Została zaprojektowana do zastosowań w pomieszczeniach, w których montaż sufitowy jednostki zasilającej jest niemożliwy, utrudniony lub niewskazany ze względów konstrukcyjnych lub instalacyjnych.

Dzięki rozporowej konstrukcji nośnej, kolumna montowana jest bezpośrednio między podłogą a sufitem, co eliminuje konieczność ingerencji w strukturę budynku lub wykonywania specjalnych wzmocnień stropu.


System **VEGAcare** zapewnia pełną funkcjonalność typową dla kolumn sufitowych, zachowując jednocześnie prostotę montażu i wyjątkową stabilność.

System znajduje zastosowanie w:

- **salach intensywnej terapii (OIT, OIOM),**
- **salach zabiegowych i opatrunkowych,**
- **salach pacjentów o mniejszym obciążeniu sprzętowym,**
- **pomieszczeniach pomocniczych i przygotowawczych.**
- **na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR).**

W zależności od konfiguracji może pełnić funkcję:

- **kolumny intensywnej opieki medycznej**
- **kolumny anestezjologicznej,**
- **kolumny zabiegowej**

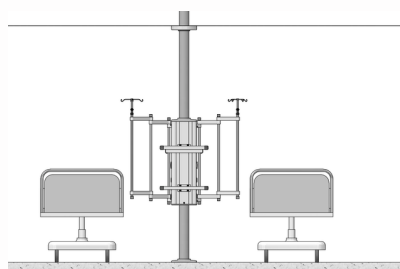

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSOL ZASILAJĄCYCH

- Konsole pionowe 3, 4 lub 6-płaszczyznowe, o wysokości: 600, 800, 1000, 1200 lub 1500 mm
- Możliwość realizacji konsol o niestandardowych wymiarach
- Korpus konsoli wykonany z profili aluminiowych
- Osłony sufitowe, pokrywy konsoli oraz osprzęt dodatkowy malowane w kolorze RAL 9002
- Obudowy łożysk, rury nośne, płyty dolne oraz zaślepki malowane w kolorze RAL 9022
- Możliwość niestandardowego malowania pokryw konsoli – dowolny RAL

PUNKTY POBORU GAZÓW I PRÓŻNI

- Systemy PPG: AGA / DIN / BS / AFNOR / inne
 - PPG: O₂, AIR, N₂O, CO₂, VAC
- Ilości PPG według indywidualnej konfiguracji
- Odciąg gazów anestezjologicznych AGSS

GNIAZDA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

- Gniazda elektryczne: Typ E (FR) / Typ F (Schuko) / Typ G (BS) / inne
- Gniazda IT: RJ-11 / RJ-12 / RJ-45, kategoria 6a lub wyższa
- Gniazda multimedialne: USB, HDMI i inne
- System przyzywowy według wytycznych Użytkownika

OPCJONALNE OŚWIETLENIE

- W ścianie głowicy zasilającej
- W spodzie głowicy zasilającej
- Ruchome (lampka), mocowane na szynie

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

- Pionowe rury nośne
- Szyny medyczne ze stali kwasoodpornej
- Półki o różnych wymiarach i nośnościach
- Szuflady
- Wysięgniki i wieszaki do płynów infuzyjnych
- Wysięgniki do monitorów lub kardiomonitorów
- Kosze na materiały jednorazowe, na cewniki itp.
- Schowki na nadmiar kabli i węży

Przekroje głowic pionowych

