

LISSAclassic to zaawansowane rozwiązanie technologiczne wyznaczające nowe standardy w sektorze medycznym. Zaprojektowana z myślą o maksymalnej funkcjonalności, estetyce oraz ergonomii, kolumna ta redefiniuje przestrzeń operacyjną, wspierając personel medyczny nawet podczas najbardziej wymagających procedur.



Specyfikacja techniczna ramion




- Dwustopniowe ramię łamane
- Dostępne pojedyncze ramię o długościach: 600, 800, 1000 lub 1200 mm
- Łączna długość zespołu ramion: od 1200 do 2400 mm
- Trzy przeguby obrotowe – maksymalny zakres obrotu: 340°
- Możliwość ograniczenia zakresu ruchu za pomocą regulacji ograniczników obrotu
- Ramiona nośne oraz rura nośna w kolorze RAL 9010
- Obudowy łożysk oraz zaślepki ramion w kolorze RAL 9022

Specyfikacja techniczna konsoli

- Wymiary: 1042 mm x 350 mm x 149 mm (wys. x szer. x głęb.)
- Wymiary pokrywy z relingiem: 1122 mm x 430 mm x 149 mm
- Korpus konsoli wykonany ze stali lakierowanej proszkowo oraz z aluminium
- Pokrywa konsoli i półki wykonane z materiału Corian® Glacier White



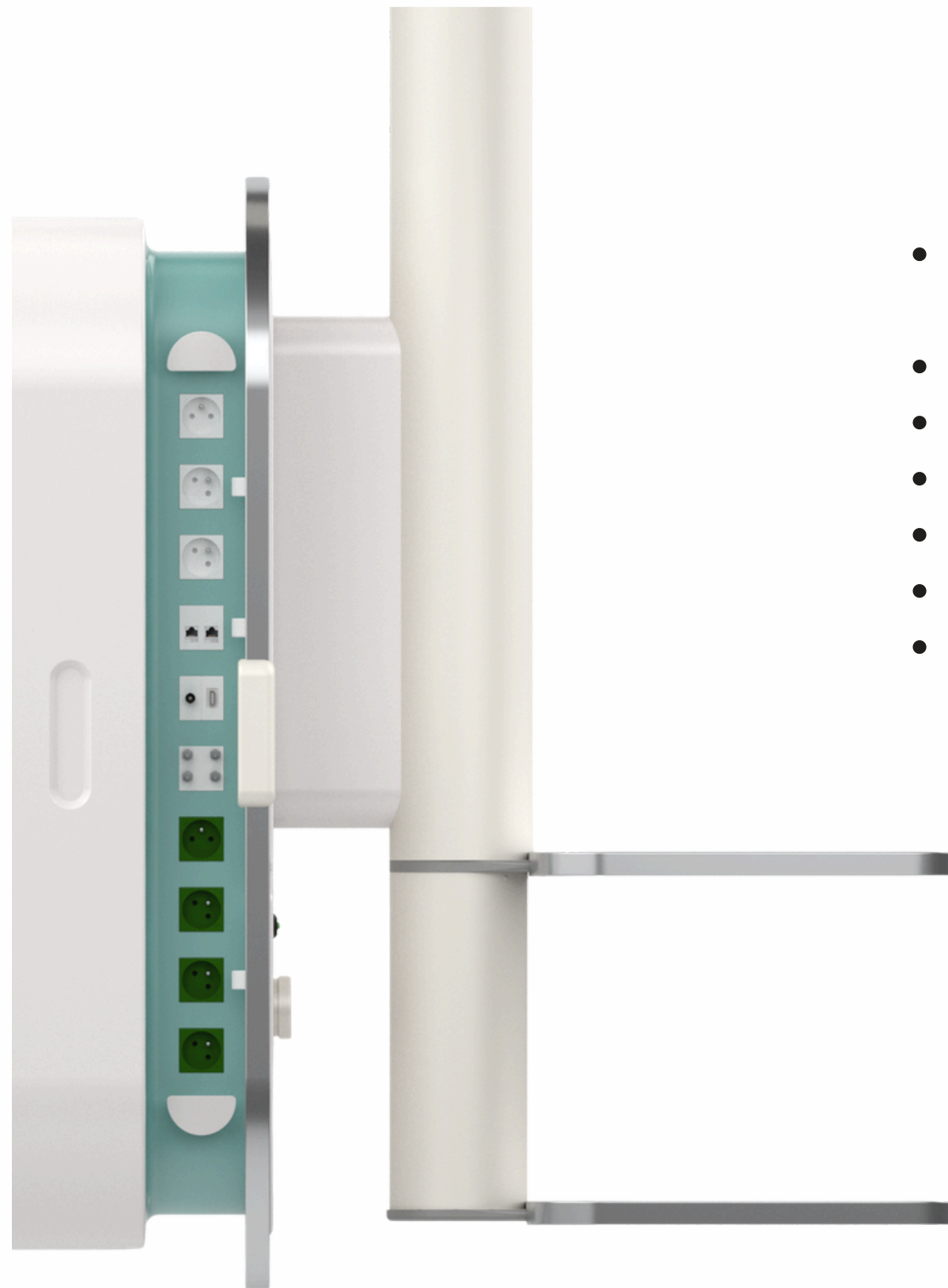

- Lekkie ramię wyposażone w hamulec pneumatyczny, elektromagnetyczny lub cierny blokujący obrót ramion
- Nowoczesny design
- Pojemny schowek oraz organizery na przewody elektryczne i gazowe
- Pokrywa konsoli zamykająca wyposażenie elektryczno-gazowe
- Obrotowa półka z blokadą pozycji
- Otaczająca konsolę szyna / rura do montażu osprzętu dodatkowego
- Inteligentny wyświetlacz dyskretnie umieszczony pod powierzchnią Corianu






Wersja podstawowa wyświetlacza

- Zegar z sekundnikiem w formie pierścienia LED
- Minutnik informujący o czasie operacji
- Wskaźnik jakości powietrza IAQ: temperatura, wilgotność, ciśnienie
- Wyraźna prezentacja informacji o alarmie z SSGM (czerwony pierścień LED informujący o alarmie stanu gazu wraz z informacją o typie gazu i jego stanu)

Wersja rozszerzona wyświetlacza

- Odtwarzanie alarmów z panelu gazów medycznych (SSGM-premium)
- Możliwość słuchania własnej muzyki przez Bluetooth
- Możliwość odbioru radia FM

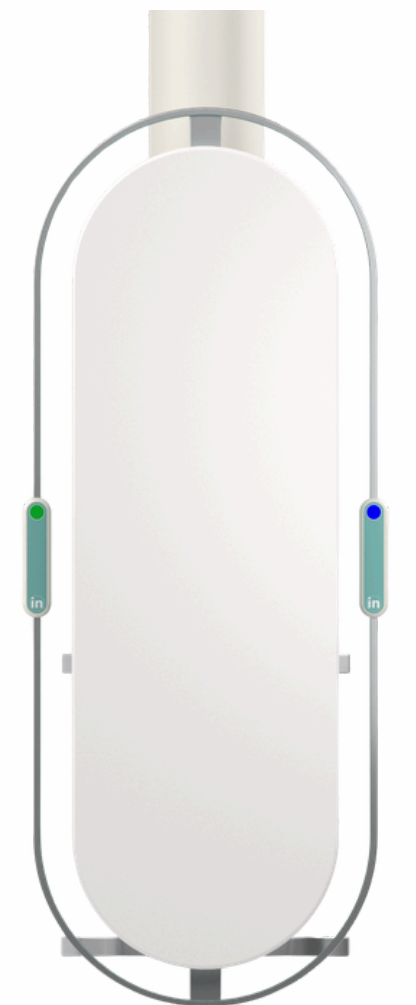

Wypożyczenie

Oświetlenie

- LED Ambient Light
- Oświetlenie na ramieniu: 2200lm, pod półką: 300lm
- Włączanie oświetlenia przełącznikiem na kolumnie lub ścianie

Wypożyczenie opcjonalne

- Szyny medyczne ze stali kwasoodpornej, półki różnej wielkości, szuflady, lampy do włożyć, ramiona przegubowe monitorów, wysięgniki infuzyjne, kosze na materiały jednorazowe



Punkty poboru gazów medycznych i próżni


- Dostępne standardy: AGA / DIN / BS / AFNOR



Gniazda elektryczne i teletechniczne

- Gniazda elektryczne: Typ E (FR) / Typ F (Schuko) / Typ G (BS) / inne
- Gniazda IT: RJ-11 / RJ-12 / RJ-45, kat. 6a lub wyższa
- Gniazda multimedialne: USB, HDMI

Standardowa konfiguracja kolumny anestezyjologicznej

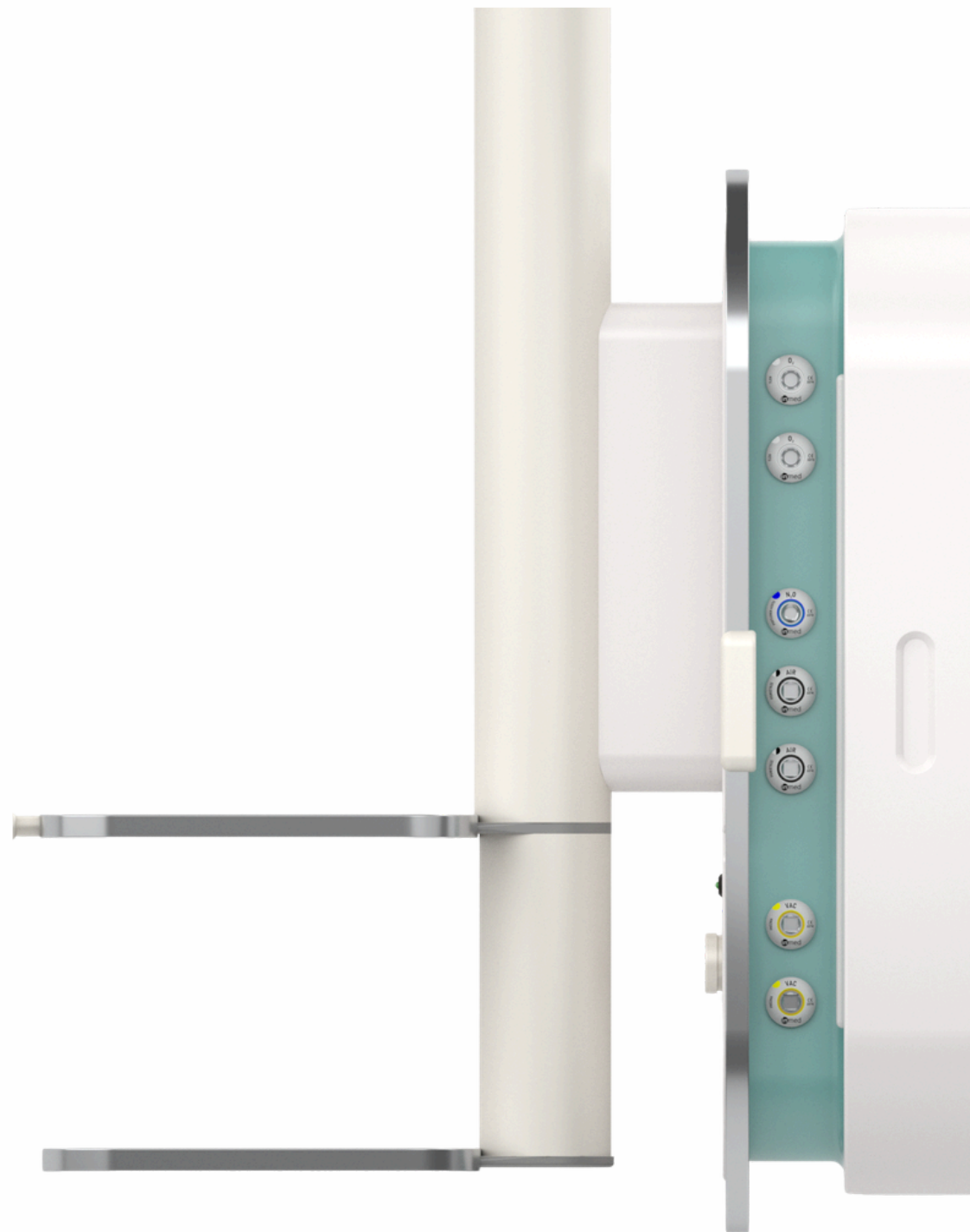

- Punkty poboru gazów medycznych: 2x O₂, 2x N₂O, 2x AIR, 2x VAC, 1x AGSS (max 7 PPGM + 1 AGSS)
- Gniazda elektryczne 230 V: 7 szt. (2 obwody) – 7 modułów
- Gniazda ekwipotencjalne: 4 szt. – 1 moduł
- Gniazda RJ-45 kat. 6: 2 szt. – 1 moduł
- Przygotowanie do instalacji użytkownika: 1 szt. – 1 moduł (łącznie max 10 modułów elektrycznych i IT)
- Wysięgnik kroplówki z 4 hakami
- Półka obrotowa z bocznymi szynami DIN 25x10 mm

Opis modułów

- 1 moduł = 1x gniazdo elektryczne
- 1 moduł = 2x RJ45
- 1 moduł = 4x gniazdo PA
- 1 moduł = 2x USB
- 1 moduł = 2x HDMI
- 1 moduł = 2x BNC
- 1 moduł = 2x S-VIDEO
- 1 moduł = 1x VGA
- 1 moduł = 1x DVI

handlowy@inmed.pl
+71 398 02 11-12
www.inmed.pl

INMED S.A.
ul. Kwiatowa 32a
55-330 Krępice
